

## МАССАЖЕР С ЧЕТЫРЬМА ГОЛОВКАМИ

# SKY HAMMER



### Меры предосторожности

- Используйте массажер только в сухом помещении, не используйте в ванной комнате.
- Если массажер или его провода повреждены, немедленно прекратите использование устройства.
- Не роняйте устройство.
- Если Вы чувствуете какой-либо дискомфорт, прекратите использование массажера.
- После применения обязательно отключите устройство от сети.
- Во избежание поражения электрическим током и пожара следуйте следующим рекомендациям:
  - не меняйте съемные головки во время работы устройства;
  - не допускайте эксплуатации детьми, инвалидами и людьми с хроническими заболеваниями.
- Берегите массажер от открытого огня.
- Не подносите массажер близко к глазам и прочим чувствительным зонам.
- При наличии хронических и острых заболеваний перед применением необходима консультация врача.
- Сеансы массажа не должны превышать 20 минут.
- При необходимости использования массажера в течение длительного времени, необходимо периодически его выключать для того, чтобы корпус остыл, так как при использовании он будет сильно нагреваться.
- Не является медикаментом и не заменяет классическую терапию, является массажным средством в дополнение к ней.
- Не применяйте на поврежденных участках кожи (раны, воспаления, ожоги и проч.).
- Не рекомендовано использовать массажер перед сном, так как эффект от массажа может являться преградой для быстрого засыпания.

### Технические характеристики

- Питание: от сети 220В
- Мощность: 24Вт
- Количество режимов: 4
- Размер: 470 x 110 x 110 мм
- Вес массажера: 1,4 кг




clevercare.ru

Модель SKY HAMMER · Артикул CC-024SH



vk.com/clevercare

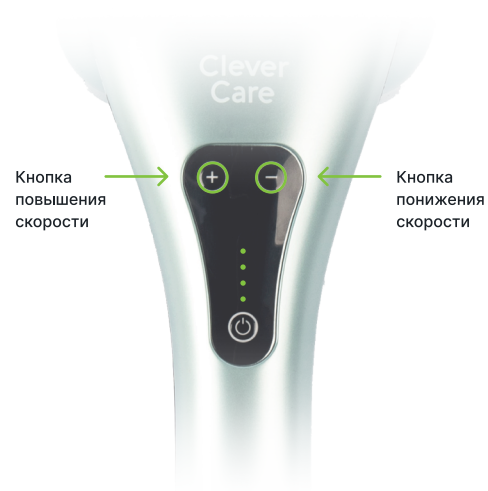

#### Встречайте массажер SKY HAMMER

Массажер CleverCare SKY HAMMER - это перкуссионный электрический вибромассажер с четырьмя округлыми головками, который улучшает кровообращение и обмен веществ, снимает боль и напряжение, предотвращает появление неприятных ощущений на следующий день после тренировки.

#### Включение/Выключение

Одним нажатием включите/выключите устройство, массажер начнёт работать автоматически. После окончания сеанса, выключите одним нажатием массажер и выньте из розетки. Примечание: никогда не вынимайте вилку из розетки во время использования, после сеанса массажа отсоедините шнур питания.

#### 4 уровня скорости:

Нажмите кнопку «+» для увеличения скорости или кнопку «-» для уменьшения. Максимальная скорость достигает 3500 импульсов в минуту

#### Управление

Направлением и силой нажатия управляете вы сами. Не воздействуйте на одно и то же место более 3 минут, двигайте массажер по нужному Вам направлению с достаточно медленной скоростью.

#### Очистка устройства

- После того, как корпус остыл и отключено питание, вы можете взять чистую сухую хлопчатобумажную ткань и очистить поверхность массажера.
- Не допускайте попадания влаги внутрь устройства.
- Не используйте для чистки массажера бензол, разжижающее вещество или другие агрессивные растворители.

#### 3 пары сменных насадок

Рекомендованные зоны воздействия: предплечье, плечи, спина, талия, бедра, ноги, руки. Уровень воздействия, который будет для вас комфортным, регулируется простым нажатием кнопки.



#### Классический

пресс-массаж, может быть проведен на любых участках тела



#### Акупунктурный

массаж, для участков тела с плотной зоной (кисти, стопы)



#### Акупрессурный

массаж, для больших участков тела

#### Хранение

- При отключении электрической розетки, пожалуйста, придерживайте вилку, не тяните за электрический провод.
- Храните массажер в сухом проветриваемом помещении.
- Не скручивайте и не запутывайте провод во избежание его деформации.

#### Комплектация

- массажер
- 3 пары сменных насадок
- инструкция.

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию товара без предварительного уведомления.