



clevercare.ru

Меры предосторожности

- Проверьте, соответствуют ли спецификации напряжения массажера напряжению в линии электропитания, не подключайте массажер к питанию влажными руками.
- Не используйте массажное устройство в местах с плохой вентиляцией, например, под одеялом, это может привести к пожару, поражению электрическим током или другим травмам.
- Используйте массажер только в сухом помещении, не используйте в ванной комнате.
- Не используйте этот прибор, если у него поврежден шнур или вилка питания, если он не работает должным образом, если его уронили, повредили или уронили в воду.
- Не используйте в местах, где используются аэрозольные продукты (спреи) или там, где используется кислород.
- Не используйте изделие в состоянии алкогольного опьянения, либо после приема снотворного.
- Для отключения прибора переведите все элементы управления в положение “выключено”, затем выньте вилку из розетки.
- Для снижения риска поражения электрическим током этот прибор оснащен поляризованной вилкой питания (один контакт шире другого). Эта вилка подходит для подключения к поляризованной розетке только одним способом. Если вилка не полностью входит в розетку, переверните вилку. Если она по-прежнему не подходит, обратитесь к квалифицированному электрику для установки подходящей розетки. Ни в коем случае не меняйте вилку.
- Не пытайтесь разобрать и починить массажер самостоятельно.
- Если вы чувствуете какой-либо дискомфорт, прекратите использование массажера.
- Следите за тем, чтобы шнур питания находился на достаточном расстоянии от нагретых поверхностей.
- Никогда не используйте на мягкой поверхности, такой как кровать или диван, где вентиляционные отверстия могут оказаться заблокированы.

Технические характеристики

- Тип массажера: вибрационный
- Количество массажных головок: 2
- Питание: от сети
- Мощность: 25 Вт
- Источник питания: 220 В переменного тока

МАССАЖЕР С ДВУМЯ ГОЛОВКАМИ

SILVER SWAN





Встречайте массажер SILVER SWAN

Массажер для тела CleverCare Silver Swan — вибромассажер с двумя округлыми головками имитирует движения рук профессионала, эффективно воздействуя на все тело, улучшая кровообращение и обмен веществ, проминая мышцы и повышая способность человека противостоять болезням. Массажер прост в управлении, он доставит вам удовольствие от массажа и поспособствует общему тонусу организма. Рекомендованные зоны воздействия: предплечье, плечи, спина, талия, бедра, ноги, руки.


Скорость вибрации

Скорость вибрации, которая будет для вас комфортной, регулируется простым движением рычага, максимальная скорость достигает 3500 импульсов в минуту.

Эксплуатация и управление

1. Вставьте вилку в розетку
2. Нажмите кнопку вкл./выкл.
3. При помощи подвижной кнопки отрегулируйте скорость вибрации
4. После сеанса массажа выключите прибор, нажав на кнопку вкл./выкл. и выньте вилку из розетки

Варианты использования

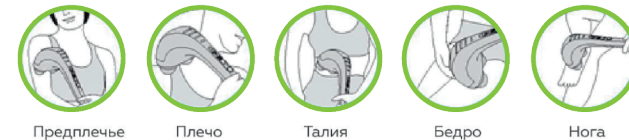

Уход и хранение

- Перед очисткой массажного аппарата выньте шнур питания из розетки.
- Не используйте для чистки массажера бензол, разжижающее вещество или другие агрессивные растворители.
- Не очищайте массажный аппарат и шнур питания влажной тканью, не используйте спирт. Для этого необходимо использовать сухую хлопчатобумажную ткань.
- Если массажер для тела не используется долгое время, рекомендуется свернуть шнур питания переменного тока и хранить его в чистом сухом месте.
- Не храните оборудование при высоких температурах, открытом огне или под прямыми солнечными лучами.
- Используйте оборудование при свете; не бросайте, не сдавливайте устройство и не допускайте сильных ударов по нему.

Комплектация

- массажер
- съемные насадки 3 пары
- инструкция

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию товара без предварительного уведомления.